




Produkt Produktnummer	VALUE Wandhalterung mit Montageplatte für Waschtisch, manuell höhenverstellbar R1214000
Farbe	VVS:654011410 NRF:6191676 EAN:5708590176499 HMI: 25578 NBS:N13:30,335 Weiß
Produkt- beschreibung	 Wandhalterung für Waschbecken, mit Montageplatte, um 150 mm höhenverstellbar (Empfehlung Zu- und Ablaufsystem R2065/R2067) Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk Wandhalterung für Waschbecken, mit Montageplatte, um 150 mm höhenverstellbar (Empfehlung Zu- und Ablaufsystem R2065/R2067) Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar 150 mm Maximale Belastbarkeit: 80 kg. Geeignet für Waschtische von bis zu 22 kg. Bei einer Belastung mit 80 kg, trägt jede Befestigungsschraube 22 kg. <i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt. Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 80 kg und das Gewicht des Waschtisches 22 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 77 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
Materialien	Hauptmaterial: Stahl Oberfläche: Rilsan
Funktionen	Höhenverstellbar um 150 mm.

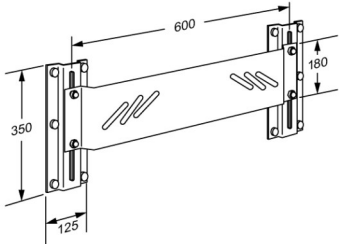

Produkt	VALUE Wandhalterung mit Montageplatte für Waschtisch, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R1214000
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.